

# SCREEN

## DRUGA TEST

www.screenpharma.it



positivo



STACCARE UN ADESIVO  
DI RILEVAMENTO CON  
LA PELLICOLA PROTETTIVA

Utilizzo:



**1** Rimuovere la pellicola protettiva prima dell'uso



**2** Prendere una goccia di liquido da testare con il dito e tamponare più volte sull'adesivo fino a quando non è assorbito.



**3** Dopo 1 minuto, se il colore della metà cambia, **NON BERE**

Per ottenere un risultato accurato, il liquido sul punto deve essere completamente asciutto.

Il disegno della carta sembra un graffio, ma è una caratteristica della carta per usi speciali.

Ogni adesivo è monouso.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.



ISTRUZIONI VIDEO



### POSITIVO E FALSO POSITIVO

Per ottenere un risultato ottimale, il liquido deve essere asciugato completamente sull'adesivo di rilevamento. Quando l'adesivo di rilevamento corrisponde al "Colore del test positivo", il risultato del test è positivo. Tuttavia, si raccomanda di non affidarsi esclusivamente a questo adesivo di rilevamento per prodotti come succhi di frutta, latticini e vino, poiché potrebbero interferire con la reazione del GHB e degli adesivi di rilevamento.

### AVVERTENZA IRRITANTE PER LA PELLE E GLI OCCHI

Dopo aver versato una goccia di liquido sull'adesivo con il dito, il liquido rimasto sul dito deve essere lavato con un fazzoletto o con acqua. Se il liquido finisce negli occhi, lavare con abbondante acqua. Un eccesso di liquido può macchiare temporaneamente gli abiti. Se si verifica un'irritazione della pelle, interrompere l'uso.

### GARANZIA E NOTIFICA LEGALE DEI RISULTATI DELLA RILEVAZIONE

Un risultato positivo indica la probabile presenza di GHB. Tuttavia, il risultato positivo può anche verificarsi nel caso di un falso positivo. Un risultato positivo non può essere l'unico criterio per determinare la presenza di GHB. Né il venditore né alcuna terza parte identificata rilascia alcuna dichiarazione in merito alla legittimità dei risultati del test o all'affidabilità dei risultati stessi. Questo adesivo di rilevamento è garantito come privo di difetti in condizioni di uso normale e se conservato secondo le istruzioni per l'uso. La presente garanzia sostituisce ogni altra garanzia, sia essa legale, esplicita o implicita. Il distributore non sarà responsabile di danni conseguenti, incidentali, speciali o di qualsiasi altro danno indiretto derivante da perdite economiche o danni materiali subiti da qualsiasi cliente a causa dell'uso di questo adesivo di rilevamento. L'uso di questo prodotto implica l'accettazione di non avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti del venditore o di qualsiasi altra parte, compresi, ma non solo, i danni compensativi, consequenziali, incidentali e punitivi.


# SCREEN

## DRUGA TEST

www.screenpharma.it



positive test color

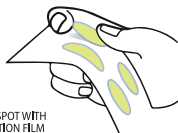

DETACH THE  
DETECTION SPOT WITH  
THE PROTECTION FILM

### Instructions:

- **1** Peel off the protective film before use.
- **2** Take a drop of the liquid with your finger and dab it on the adhesive several times until it is absorbed.
- **3** After 1 minute, if the color of the half part changes, DO NOT DRINK!

The liquid on the spot should be completely dried for the accurate result.

The pattern of the paper may be mistaken for a scratch but it is a characteristic of the paper.

The detection spot is for single use.

Caution: read instructions before use.

Actual picture  
for reference

green



VIDEO INSTRUCTIONS



### POSITIVE AND FALSE POSITIVE

The liquid should be dried completely on the detection sticker for the best result. When the detection sticker matches the "Positive test color", a positive test result has occurred. However, it is recommended that products such as fruit juice, dairy products, and wine do not rely solely on this detection sticker because they may interfere with the reaction of GHB and detection stickers.

### WARNING SKIN AND EYE IRRITANT

After placing a drop of the liquid in to the spot by finger, the liquid remaining on the finger should be washed using tissue or water. If the liquid touches the eyes, rinse it with copious amounts of water. Excess liquid can temporarily stain the clothes. If skin irritation occurs, discontinue use.

### GUARANTEE AND LEGAL NOTICE OF DETECTION RESULTS

A positive result indicates that it may be presence of GHB. However, the positive result may also occur in the case of a false positive. A positive result cannot be the only criterion for determining the presence of the GHB. Neither seller nor any identified third party makes any representations as to the lawfulness of the test results, or as to the reliance upon the results. This detection sticker is warranted to be free from defects under normal use and when stored by the instructions for use. This warranty is in lieu of all other warranties, whether statutory, express, or implied. Distributor shall not be liable for consequential, incidental, special, or any other indirect damages resulting from economic loss or property damages sustained by any customer from the use of this detection sticker. The use of this product constitutes an agreement that no claim shall be made against the seller or any party for damages, including but not limited to compensatory, consequential, incidental, and punitive.